

Matériel nécessaire :

- 2 seringues pré-remplie de NaCl 0.9%
- 1 set avec 5 compresses et un champ de soin
- 1 blouse à usage unique
- 1 paire de gants non stériles
- 1 flacon de produit alcoolique non bétadiné
- 1 flacon de soluté hydroalcoolique (SHA)
- 1 boîte à objet piquant coupant tranchant
- sacs poubelles (déchets managers, emballages et DASRI)



Déposer le matériel de soins sur l'adaptable préalablement nettoyé.
Mettre une blouse à usage unique, faire une désinfection des mains avec le SHA et mettre les gants non stériles



Retirer le pansement occlusif et le jeter dans le sac DASRI



Désinfecter la valve bidirectionnelle avec un antiseptique alcoolique



Effectuer un rinçage pulsé de 10 ml




Rincer avec une deuxième seringue de 10 ml en effectuant une rotation complète de l'aiguille de Huber (garder 3 à 4 ml de liquide dans la seringue)



Relever le piston de l'aiguille de Huber à la verticale



Pousser sur le piston de l'aiguille de Huber tout en rinçant avec le reste de NaCl de la seringue pré-remplie

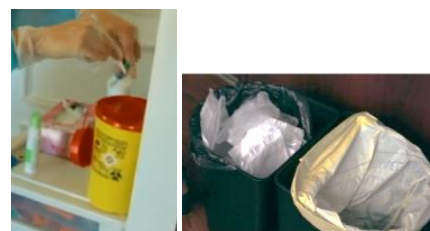

Jeter l'aiguille dans le container pour objets piquants coupants tranchants et trier les déchets selon le guide du tri présent à l'avant du classeur ou dans le livret soignant