

Matériel nécessaire :

- 1 set de pose de voie veineuse centrale
- 1 aiguille de Huber
- 1 prolongateur multi-voies ou valve bidirectionnelle
- 1 seringue préremplie de NaCl 0.9%
- 1 dose de détergeant
- 1 dose de sérum physiologique
- 1 dose de désinfectant alcoolique
- 1 surblouse
- 1 flacon de soluté hydroalcoolique (SHA)



Nettoyer l'adaptable avec les lingettes désinfectantes fournies par l'HAD

1



Enfiler une blouse de protection et sortir le matériel nécessaire au soin sur l'adaptable

2



Ouvrir le set de pose de voie veineuse centrale, enfiler le masque et la charlotte et mettre le masque au patient

3



Ouvrir les flacons, déposer l'aiguille de Huber, le prolongateur et 1 seringue préremplie sur le champ stérile. Enfiler un gant stérile et disposer les compresses en 5 tas de 2

4



Imbiber les compresses avec le détergent, sérum physiologique et désinfectant alcoolique puis enfiler le deuxième gant stérile

5



Effectuer la préparation cutanée : Déterger, rincer, sécher, et désinfecter en 2 temps pour chaque étape, sur la CIP et au pourtour pour retirer tout résidu de colle.

6



Retirer les gants stériles et se désinfecter les mains au SHA

7



Enfiler la 2^{ème} paire de gants stériles et purger le prolongateur multi-voies ou avec valve bidirectionnelle en laissant la seringue connectée au système

8



Purger l'aiguille de Huber, clamper la ligne et laisser la seringue connectée à l'aiguille 9



Installer le champ troué autour de la CIP 10



Piquer dans le septum jusqu'au fond de la butée à l'expiration du patient 11



Vérifier la bonne perméabilité de la CIP en effectuant un retour sanguin si la CIP le permet

12



Effectuer un rinçage pulsé et clamper l'aiguille pour retirer la seringue

13



Visser le prolongateur multi-voies ou avec valve bidirectionnelle à l'aiguille de Huber et effectuer un nouveau rinçage du système **sans clamper**

14



Protéger la peau avec une compresse pliée en 4 et Fixer l'aiguille avec le film transparent

15



Le point d'insertion doit rester visible pour surveiller tout signe infectieux

16



Trier les déchets selon le guide du tri dans le classeur ou le livret soignant

17




Nettoyer l'adaptable

18



Déposer le sac DASRI dans le carton à distance de la pièce de soin 19

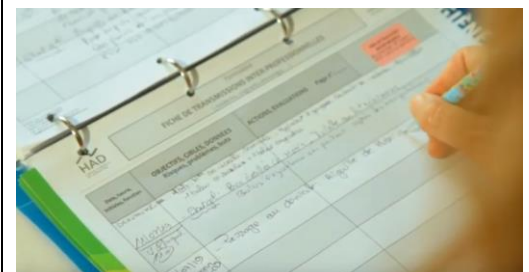

Tracer la pose de l'aiguille dans le classeur HAD 20